



Doprowadź pacjentów klasy II i III do klasy I za pomocą D-bar.

D-bar to aparat ortodontyczny **klejony bezpośrednio** lub pośrednio, który zapewnia leczenie klasy II lub III w uzębieniu mlecznym, stałym lub mieszanym.

D-bar został zaprojektowany, aby **zoptymalizować relacje trzonowców** poprzez zminimalizowanie nadmiernej ekstruzji kła, z wysoce estetycznym projektem aparatu dla większego komfortu i skrócenia czasu leczenia.

D-bar ma **uniwersalną konstrukcję** na lewą i prawą stronę.

D-bar składa się z **dwóch oddzielnych elementów**, które muszą być połączone przez lekarza w momencie pozycjonowania lub w trakcie pośredniej procedury klejenia.



Zeskanuj kod QR
i poproś o więcej
informacji o D-barach.



Polorto

Zawsze dobre rozwiązania




+48 34 366 51 11



ortodoncja@polorto.com.pl



www.polorto.com.pl

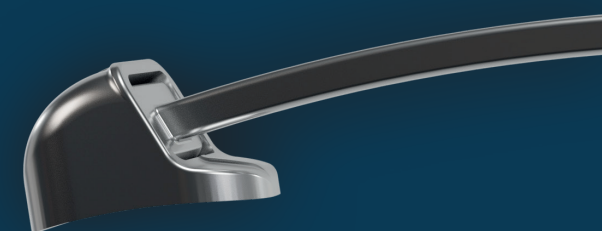

D-bar

Aparat korekcyjny klasy II i III



Polorto

Zawsze dobre rozwiązania

Dystalizacja

Zaprojektowany, aby wspomagać optymalizację relacji międzyszczękowych

Cyfrowy

Zaprojektowany do użytku w połączeniu z systemem klejenia pośredniego i w ten sposób włączony do cyfrowego przepływu pracy

Dyskretny

Kompatybilny w połączeniu z przezroczystymi nakładkami **A-ligner**

Czas trwania

Idealny do skrócenia czasu leczenia ortodontycznego

D-bar



OPAKOWANIE

D-bar dostępny jest w opakowaniach jednostkowych oraz w zestawach.

Pojedyncze opakowanie zawiera dwa uniwersalne ramiona tego samego rozmiaru, dwa gniazda na trzonowce i jedną linijkę.

Zestaw zawiera 24 uniwersalne ramiona (po dwa z każdego rozmiaru), 24 gniazda na zęby trzonowe, pęsetę i 24 linijki.

Numer kat.	Opis	Zawartość
B30-DB16	D-bar - size 16	2 ramiona 2 gniazda na trzonowce 1 linijka
B30-DB17	D-bar - size 17	
B30-DB18	D-bar - size 18	
B30-DB19	D-bar - size 19	
B30-DB20	D-bar - size 20	
B30-DB21	D-bar - size 21	
B30-DB22	D-bar - size 22	
B30-DB23	D-bar - size 23	
B30-DB24	D-bar - size 24	
B30-DB25	D-bar - size 25	
B30-DB26	D-bar - size 26	24 ramiona (po dwa w tym samym rozmiarze) 24 gniazda na trzonowce 24 linijki 1 pęseta
B30-DB27	D-bar - size 27	
B30-DB T	D-bar – molar support	
B30-DB K	D-bar – Set	

CECHY

PRECYZJA

Zmniejszenie stopni swobody połączenia, aby zapobiec nieoczekiwanym ruchom segmentu trzonowiec-kiel

UNIWERSALNY

Przeznaczony do stosowania zarówno po lewej lub prawej stronie

EFEKTYWNOŚĆ

Wyjątkowo mezialna pozycja haczyka w celu zwiększenia skuteczności działania

ERGONOMICZNY

Prawidłowe klejenie na trzonowcu jest łatwe dzięki dwóm liniom pozycjonującym. Znakowanie laserowe ułatwia identyfikację właściwego rozmiaru

WYTRZYMAŁOŚĆ I WYGODA

Podstawa retencyjna z laserowymi podcięciami w celu zwiększenia siły przyczepności i późniejszego łatwego ściągania aparatu.

KIEDY UŻYĆ

D-bar to urządzenie, które oferuje szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu wad zgryzu klasy II, zarówno u pacjentów z uzębieniem mlecznym, stałym, jak i mieszanym. Korzystnie stosowany na początku leczenia dla dystalizacji zębów trzonowych i przedtrzonowych.

D-bar może być używany **samodzielnie lub w połączeniu z innymi dostępnymi na rynku aparatami** takimi jak nakładki, zamki lub inne stałe aparaty ortodontyczne.

Umieszczając go na dolnym łuku, D-bar pomaga również w rozwiązywaniu problemów klasy III.

ZALETY

Kontrola ruchu segmentu trzonowcowo-klowego.

System blokujący został zaprojektowany z wąskimi tolerancjami w celu zwiększenia skuteczności leczenia, aby zminimalizować niepożądane ruchy kłów lub niechciane ruchy między łukami.

Wysoka skuteczność. Umieszczenie haczyka po mezjalnej stronie kła zwiększa skuteczność aparatu poprzez zwiększenie sił poziomych w stosunku do pionowych wywołujących ekstruzję.

Łatwe pozycjonowanie. Mezdystalne i okluzyjno-dziąsłowe linie pozycjonujące zębodołu trzonowca ułatwiają pozycjonowanie aparatu na zębie.

Skrócenie czasu leczenia. Zastosowanie korektora D-bar poprawia relacje zębów trzonowych, przyspieszając leczenie ortodontyczne.

Wysoki komfort. Jego gładka i niskoprofilowa konstrukcja poprawia komfort pacjenta i współpracę podczas leczenia.

ZASTOSOWANIE

D-bar jest uniwersalny i **składa się z dwóch elementów**, gniazda na trzonowiec i ramienia, dostarczanych oddzielnie do montażu.

Istnieje **możliwość łatwej wymiany samego ramienia** lub zmiany jego rozmiaru w trakcie terapii, jeśli wymagają tego warunki kliniczne. Ta cecha sprawia, że D-bar jest elastyczny, redukując i upraszczając niezbędne zapasy kliniki.

D-bar **można również zintegrować z cyfrowym przepływem pracy** i umieścić za pomocą procedury łączenia pośredniego; w rzeczywistości użycie dwóch oddzielnych elementów umożliwia włączenie urządzenia do szablonów lub uchwytów transferowych.

D-bar **jest wykonany w całości w technologii MIM ze stali 17-4**; podstawa retencyjna jest wykonana za pomocą systemu laserowego o wysokiej częstotliwości, co zapewnia doskonałą odporność na odrywanie. Można stosować dowolny klej ortodontyczny.

D-bar jest dostępny w kolejnych rozmiarach (krokach) co jeden milimetr **w dwunastu rozmiarach**, od rozmiaru 16 do 27. Identyfikacja poprzez pomiar jest łatwa i szybka dzięki znakowaniu laserowemu. W oprogramowaniu DDP-Ortho wymiary dobierają się automatycznie, z możliwością ich zmiany przez operatora.

JAK UŻYWAĆ

Po wybraniu **najbardziej odpowiedniego rozmiaru ramienia** D-bar, przyklej gniazdo na trzonowiec górny (lub, jeśli to konieczne, na przedtrzonowiec) przy korekcie klasy II.

Włóż ramię do gniazda na trzonowcu, **aż okrągły koniec całkowicie zniknie**, a następnie przystąp do przyklejenia drugiego końca do kła (lub do przedtrzonowca, jeśli to konieczne). Na dolny trzonowiec lub przedtrzonowiec **przyklej aparat pomocniczy** (rurkę lub guzik) i **połącz go z haczykiem** ramienia za pomocą wyciągów wewnętrznych.

Po wyprowadzeniu z klasy II lub III usuwa się D-bar.

Zawsze zaleca się zapoznanie z instrukcją dostarczoną z produktem.

JAK

KIEDY